

# Lumitester Smart & LuciPac A3/Pen



## Snelstartgids

Deze Snelstartgids is zo opgezet dat zelfs iemand die de Lumitester Smart en de LuciPac A3/Pen voor het eerst gebruikt, kan begrijpen hoe deze werken, en het gemak ervan kan ondervinden. Zie voor het juiste gebruik en voorzorgsmaatregelen omtrent reagentia en het product de desbetreffende handleidingen. De handleiding van het product is te downloaden met de volgende link: <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>


Kikkoman Biochemifa Company



## Slimmer hygiënebeheer met behulp van de applicatie

- Leg verbinding met een smartphone of tablet.
- Gebruik de speciale app "Lumitester".
- De applicatie toont automatisch het inspectieresultaat. Trends in het verleden zijn makkelijk te begrijpen.
- De testresultaten worden in de cloudopslag bewaard en kunnen op meerdere smartphones of tabletten bekeken worden.

## 1 In de verpakking

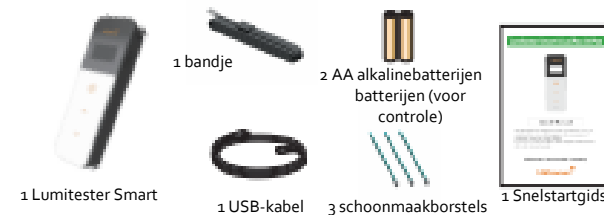


## 2 Instellingen

**Hoe u batterijen plaatst en Bluetooth AAN-/UITZET**  
De batterijhouder en de aan-/uitschakelaar voor Bluetooth bevinden zich onder het batterijdeksel. De standaardinstelling voor Bluetooth waarmee de fabrikant het toestel aflevert, is OFF (Uit).

### Het batterijdeksel openen/dichtdoen

- Druk op "PUSH" om de standaard te gebruiken.
- Druk op het merkteken op het batterijdeksel om dat te verwijderen

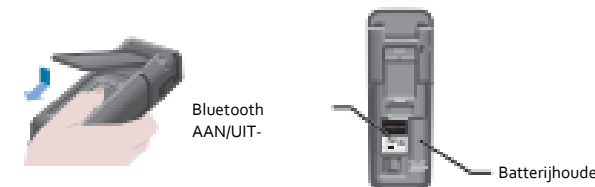

- Plaats het batterijdeksel terug als de hele procedure voltooid is.

### Plaats de batterijen

Plaats twee nieuwe AA-alkalinebatterijen of twee opgeladen AA-nikkelhydridebatterijen, en let op de polariteit.



### Bluetooth AAN/UIT schakelen

Wilt u de applicatie met een smartphone en/of tablet verbinden, zet de aan-/uitschakelaar (ON/OFF) voor de Bluetooth dan op ON. Op het scherm verschijnt de melding Bluetooth ON.



### Pas op


- Voor elk land zijn de te gebruiken radiofrequenties en communicatiemethodes aangegeven. In sommige landen zou de registratie van draadloze toestellen verplicht kunnen zijn. Zie onderstaande website voor landen waar Bluetooth te gebruiken is. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>
- In een land dat niet op onderstaande lijst staat, zet u de Bluetooth-schakelaar op OFF.
- U kunt niet met Bluetooth verbinding leggen met een pc. Gebruik alstublieft de meegeleverde USB-kabel.

In deze Snelstartgids wordt beschreven hoe u voor een meting een smartphone en/of tablet met het product verbindt. U kunt ook een meting doen met uitsluitend het product en een "LuciPac A3/Pen". Wilt u een meting doen met uitsluitend het product, of met een verbinding met een pc, zie dan de volledige handleiding.

## De applicatie gebruiken (gratis)




- Download de applicatie met behulp van de QR-code of de URL op de smartphone of tablet. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>

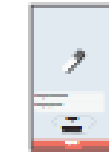

- Open de applicatie en volg de instructies op het scherm om de applicatie in te stellen. Als u de applicatie voor het eerst gebruikt, voer dan eerst de registratie uit. Geregistreerde gebruikers kunnen inloggen met hun ID en wachtwoord.



- Zet het product aan wanneer het verbindingsscherm op de smartphone of tablet verschijnt. Als Bluetooth niet op ON staat, zet het dan in het instellingenscherf (setup) op ON.

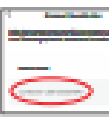

- Selecteer in het scherm van de applicatie het serienummer van het product. Dit maakt automatische synchronisatie van tijd, datum en tijdstempels in de meetgegevens mogelijk.



- Als er verbinding is gelegd, is er BLE als statusindicator te zien.
- Als het homescherm verschijnt, zijn de smartphone/tablet en het product klaar voor gebruik.

Zie Help in de app voor details omtrent de aanvraag.

## 3 Hoe u een test met het staafje uitvoert



- Druk de aan-/uitknop van het product in, en houd die een tijdje ingedrukt.
- Open de applicatie, selecteer het testpunt, en start de meting.
- Voer de test met het staafje uit. (Zie voor details omtrent de "LuciPac A3/Pen" de handleiding.)
- Open het deksel van de meetkamer en doe de "LuciPac A3/Pen" in de kamer.
- Doe het deksel van de meetkamer dicht en druk op START. De meting begint. Na de aftelling wordt het meetresultaat getoond.
- Verwijder na de meting de "LuciPac A3/Pen". Als de "LuciPac A3/Pen"-koker niet uit de meetkamer wordt verwijderd, blijft u de toon van de foutmelding horen.

Houd u bij het van de hand doen van de "LuciPac A3/Pen" aan de plaatselijke overheidsregels.

## 4 Resultaat met de applicatie controleren



- Het meetresultaat wordt automatisch van het product naar de smartphone of tablet gestuurd en wordt in de applicatie op het testpunt getoond.
- Als er een benchmarkwaarde voor het testpunt is ingesteld, is het mogelijk om onmiddellijk een resultaat van gepasseerd of niet gepasseerd te krijgen.
- Het trendschema voor elk testpunt wordt automatisch getoond.
- Passeerratio en -schema voor elk testpunt zijn met de analysefunctie van de applicatie te controleren.

\*De applicatieschermen worden nog verder ontwikkeld.

Zie Help in de app voor details omtrent de aanvraag.

## 5 Voorzorgsmaatregelen voor een veilig en correct gebruik

- Het product is ontworpen voor een ATP Swab Test. Zet dit product niet voor andere gebruiksdoelen in.

Alstublieft zorgvuldig lezen voor een correct gebruik van het product.

In deze sectie moet u de "Voorzorgsmaatregelen voor een veilig en correct gebruik" zorgvuldig lezen voordat u het product gebruikt. De hier vermelde voorzorgsmaatregelen betreffen belangrijke veiligheidskwesties, en bovendien storingen en defecten.

- Pas op** Als u niet goed met het product omgaat, kan dit letsel of schade veroorzaken.
- Verboden** Geeft aan wat u NIET moet doen in uw gebruik van het product.

Pas op	
Haal het product niet uit elkaar en modificeer het niet. Dit kan brand, een elektrische schok of een storing veroorzaken.	Raak het product niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u een elektrische schok krijgen of een storing veroorzaken.
Druk niet op het scherm of bedieningspaneel, wrijf ze niet, en gebruik er geen harde of scherpe voorwerpen op. Dit kan letsel of storing veroorzaken.	Gebruik uitsluitend de gespecificeerde batterijen (maat AA alkaline batterijen, of opgeladen maat AA nikkelhydride batterijen). Dit kan ontbranding, letsel of storing veroorzaken.
Gebruik geen schoonmaakmiddel op het product dat op organische basis is. Dat kan brand, een elektrische schok of een storing veroorzaken.	Verwijder de batterijen als het product langere tijd wordt opgeborgen. Doet u dat niet, dan kunnen de batterijen lekken en barsten.
Gebruik het product niet, of berg het niet op, op plekken waar het bloot wordt gesteld aan rechtstreeks zonlicht, stof en/of een hoge temperatuur of vochtgehalte. Dit kan brand of storing veroorzaken.	Plaats het product niet op plekken waar de temperatuur hoog oploopt (bij een vuur of kachel, bij een verwarming, of in de blakende zon). Dit kan ontbranding, verbranding of storing veroorzaken.

## 6 Aftersaleservice

### Garantie

De garantieperiode voor de Lumitester Smart is één jaar vanaf de aankoopdatum. Echter, in EU-lidstaten waar EU-richtlijn 1999/44/EC van kracht is, is het twee jaar vanaf de aankoopdatum.

Als er gedurende de garantieperiode een mankement optreedt, zullen wij dat kosteloos repareren of vervangende onderdelen leveren. Vergoedingen zijn echter beperkt tot storingen die voortvloeien uit defecten in het materiaal van dit product, of fouten bij de productie. Daarnaast wijzen wij u erop dat het volgende niet door de garantie wordt gedekt, zelfs niet tijdens een periode waarin u voor vergoeding in aanmerking komt.

- Als er geen document of bewijs is dat de aankoopdatum verifieert.
- Ongeacht de vraag of er een defect bestaat of niet, verlies van gegevens indien het niet mogelijk is om de gegevens uit het geheugen en de instellingen op een scherm weer te geven of op een pc te laden.
- Elke storing of vorm van schade, of enig ander verlies geleden, door het werken met, of het gebruiken van, het product op een wijze die niet met de instructies in de handleiding overeenkomt, onachtzaam gebruik ervan, modificeren of omvormen van dit product, of de consequenties van een natuurramp die door overmacht ontstaan is.

De omvang van de schadeloosstelling voor gebreken van dit product is beperkt tot een schadevergoeding die valt onder de dekking van deze sectie over de garantie, en een schadevergoeding voor enig ander verlies of schade, inclusief indirecte of bijzondere verliezen of schades, die niet onder de omvang van de schadeloosstelling vallen.

Om de prestaties te verbeteren, kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Uitgegeven door:

Kikkoman Biochemifa Company  
2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokio 105-0003, Japan  
TEL: +81-3-5521-5481 FAX: +81-3-5521-5498  
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>