

Lumitester Smart și LuciPac A3/Pen



Manual rapid

Acest manual rapid este conceput astfel încât chiar și persoanele care utilizează dispozitivul pentru prima dată să poată înțelege cum pot utiliza și cum se pot bucura de avantajele Lumitester Smart și LuciPac A3/Pen. Pentru o utilizare corectă și măsurile de precauție privind reactivii și produsul, consultați manualele relevante.

Manualul de instrucțiuni al produsului poate fi descărcat utilizând următorul link:
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>


Kikkoman Biochemifa Company



Gestionare mai inteligentă a igienei utilizând aplicația

- 1 Conectați dispozitivul la smartphone sau tabletă.
- 2 Aplicația „Lumitester” dedicată utilizării.
- 3 Aplicația reflectă automat rezultatul inspecției. Tendințele anterioare pot fi, de asemenea, ușor înțelese.
- 4 Rezultatele testului sunt salvate în spațiul de stocare în nor și pot fi vizualizate de pe multiple dispozitive inteligente.

1 Conținutul ambalajului

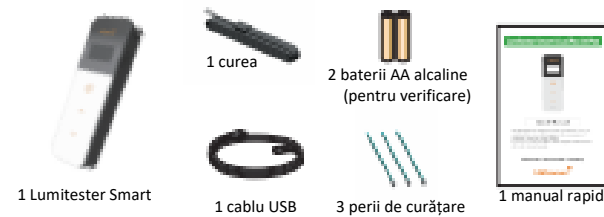


2 Configurare

Cum să introduceți bateriile și să activați/dezactivați Bluetooth

Compartimentul pentru baterii și comutatorul pentru activare/dezactivare Bluetooth se află pe partea interioară a capacului compartimentului pentru baterii. Setarea din fabrică a comutatorului pentru activare/dezactivare Bluetooth este dezactivat.

Pentru a deschide/închide capacul compartimentului pentru baterii

- 1 Apăsăți „PUSH” pentru a deschide suportul.
- 2 Apăsăți marcajul de pe capacul compartimentului pentru baterii pentru a scoate capacul.

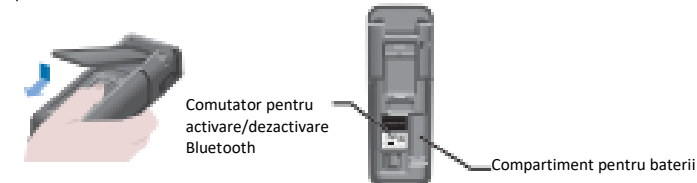

- 3 Reatașați capacul compartimentului pentru baterii după finalizarea întregii operațiuni.

Puneți bateriile

Introduceți două baterii alcaline AA noi sau două baterii de nichel-hidru metalică AA încărcate, respectând polaritatea.



Activare/dezactivare Bluetooth

Pentru a conecta aplicația cu un smartphone și/sau o tabletă, setați comutatorul pentru activare(ON)/dezactivare(OFF) Bluetooth în poziția activat. Semnul Bluetooth activat(ON) apare pe unitatea de afișare.



Atenție

- Benzile de frecvență radio și metodele de comunicare care pot fi utilizate sunt definite pentru fiecare țară. În unele țări poate fi obligatorie înregistrarea dispozitivelor wireless. Consultați site-ul web de mai jos pentru a vedea țările în care poate fi utilizat Bluetooth. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>
- Într-o țară care nu se află în lista de mai jos, setați comutatorul Bluetooth în poziția OFF.
- Bluetooth nu poate fi utilizat pentru conectare la un calculator. Vă rugăm să utilizați cablul USB furnizat.

Manualul rapid descrie procedura de măsurare prin conectarea smartphone-ului și/sau tabletei la produs. Măsurarea poate fi efectuată și utilizând doar produsul și „LuciPac A3/Pen”. Pentru a efectua măsurarea cât timp produsul este conectat la un calculator sau măsurarea utilizând produsul sineur, consultați manualul de instrucțiuni.

Utilizarea aplicației (gratuit)




- 1 Descărcați aplicația pe smartphone sau tabletă cu ajutorul codului QR sau al URL-ului. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/sunnot/dl/smart>



- 2 Lansați aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o configura. Este necesară o înregistrare inițială atunci când utilizați aplicația pentru prima dată. Utilizatorii înregistrați se pot conecta introducând ID-ul și parola.



- 3 Când apare ecranul de conectare a dispozitivului inteligent, porniți produsul. Dacă Bluetooth nu este activat, activați-l din ecranul de configurare.

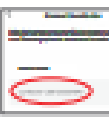

- 4 Selectați numărul de serie al produsului în ecranul aplicației. Acest lucru permite sincronizarea automată a orei și datei și marcarea temporală a datelor măsurate.



- 5 După ce conexiunea a fost stabilită, BLE este afișat la indicatorul de stare.
- 6 Atunci când apare ecranul de pornire, smartphone-ul/tableta și produsul sunt pregătite pentru utilizare.

Pentru detalii privind aplicația, consultați secțiunea Ajutor din interiorul aplicației.

3 Cum să efectuați testul cu bețișorul cu vată



- 1 Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pornire al produsului pentru o scurtă perioadă de timp.
 - 2 Lansați aplicația, selectați punctul de testare și începeți măsurarea.
 - 3 Efectuați testul cu bețișorul cu vată. (Pentru detalii privind „LuciPac A3/Pen”, consultați manualul de utilizare.)
 - 4 Deschideți capacul camerei de măsurare și puneți „LuciPac A3/Pen” în cameră.
 - 5 Închideți capacul camerei de măsurare și apăsați START. Măsurarea începe. Rezultatul măsurării este afișat după numărătoarea inversă.
 - 6 Scoateți „LuciPac A3/Pen” după măsurare. Dacă tubul „LuciPac A3/Pen” nu este scos din camera de măsurare, alarma de eroare continuă să emită un semnal sonor.
- Respectați reglementările administrației locale atunci când eliminați „LuciPac A3/Pen”.

4 Verificarea rezultatului cu ajutorul aplicației



- 1 Rezultatul măsurării este trimis automat de la produs la smartphone sau tabletă și este afișat la punctul de testare al aplicației.
- 2 Dacă la punctul de testare a fost setată o valoare de referință, este posibilă determinarea imediată a unui rezultat de acceptare sau respingere.
- 3 Diagrama de tendințe este afișată automat pentru fiecare punct de testare.
- 4 Rata de acceptare și diagrama pentru fiecare punct de testare pot fi verificate cu funcția de analiză a aplicației.

*Ecranele aplicației sunt în curs de dezvoltare.

Pentru detalii privind aplicația, consultați secțiunea Ajutor din interiorul aplicației.

5 Măsurile de precauție pentru utilizare corespunzătoare și în condiții de siguranță

- Acest produs este conceput pentru testul cu bețișor cu vată ATP. Nu utilizați acest produs altfel decât este descris în acest manual de instrucțiuni.
- Vă rugăm să citiți cu atenție pentru o utilizare corespunzătoare a produsului.

Această secțiune „Măsurile de precauție pentru utilizare corespunzătoare și în condiții de siguranță” trebuie citită cu atenție înainte de a utiliza produsul. Mesajele de precauție enumerate aici indică probleme de siguranță importante, precum și erori și

- ⚠ **Atenție** Manipularea incorectă a produsului poate conduce la răni sau daune.
- 🚫 **Interzis** Indică ceea ce NU trebuie făcut atunci când manipulați produsul.

⚠ Atenție	
Nu dezamblați sau modificați produsul. Acest lucru poate cauza incendii, șocuri electrice	Nu atingeți produsul cu mâinile ude. Acest lucru poate cauza șocuri electrice sau
Nu împingeți și nu frecăți afișajul și panoul de exploatare cu obiecte dure sau ascuțite. Acest lucru poate cauza rănire sau defecțiuni.	Nu utilizați alte baterii decât cele specificate (baterii alcaline AA sau baterii de nichel-hidru metalică AA încărcate). Acest lucru poate cauza incendii, rănire sau defecțiuni.
Nu aplicați solvent organic pentru a curăța produsul. Acesta poate cauza incendii, șocuri electrice	Scoateți bateriile atunci când produsul urmează să fie depozitat pentru o perioadă lungă de timp. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza
Nu utilizați și nu depozitați produsul expus la lumina directă a soarelui, praf, și/sau temperatură/umiditate ridicată. Acest lucru poate cauza incendii sau defecțiuni.	Nu așezați produsul în locuri unde temperatura poate deveni ridicată (lângă foc, lângă calorifer sau sub soare arzător). Acest lucru poate cauza incendii, arsuri sau defecțiuni.

6 Servicii post-vânzare

Garantie

Perioada de garanție a dispozitivului Lumitester Smart este un an de la data cumpărării. Cu toate acestea, în statele membre ale UE, unde este în vigoare Directiva UE 1999/44/EC, aceasta este doi ani de la data cumpărării. Dacă apare o defecțiune în timpul perioadei de garanție, vom efectua fie o reparație gratuită, fie vom furniza piese de schimb. Cu toate acestea, compensația este limitată la defecțiuni care rezultă din defecte ale materialelor acestui produs sau defecte de fabricație. În plus, vă rugăm să rețineți că următoarele nu sunt acoperite de garanție, nici măcar în timpul perioadei de compensare.

- 1 Cazul în care nu există niciun fel de document care să poată valida data cumpărării.
- 2 Indiferent dacă există sau nu un defect, pierderea conținutului înregistrat drept rezultat a incapacității de afișare sau încărcare la un calculator a datelor din memorie și a datelor setărilor.
- 3 Orice defecțiune sau daună, sau orice altă pierdere suferită din cauza utilizării produsului contrar celor descrise în acest manual de instrucțiuni, neglijenței în timpul utilizării, modificării sau altei reconstrucții a acestui produs sau afectarea acestuia de un dezastru natural în afara controlului uman.

Domeniul de aplicare a despăgubirii pentru defectarea acestui produs este limitat la despăgubirea acoperită de această secțiune de garanție, iar despăgubirea pentru orice altă pierdere sau daună, inclusiv pierderi sau daune indirecte sau speciale, nu este inclusă în domeniul de aplicare a despăgubirii.

În scopuri de îmbunătățire a performanțelor, specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Emis de:

Kikkoman Biochemifa Company
 2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japonia
 TEL: +81-3-5521-5481 FAX: +81-3-5521-5498
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>