

## Lumitester Smart és LuciPac A3/Pen



### Rövidített kézikönyv

Ezt a rövidített kézikönyvet arra terveztük, hogy még a készüléket először használó személyek is megértsék annak használatát és megtapasztalják a Lumitester Smart és LuciPac A3/Pen által nyújtott kényelmet. A reagensek és a készülék helyes használatáról és a szükséges óvintézkedésekről az adott termék kézikönyvében olvashat. A készülék kézikönyve letölthető az alábbi linkről: <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>

Kikkoman Biochemifa vállalat



## A higiénia okosabb kezelése az alkalmazás segítségével

1 Csatlakoztassa az okostelefonhoz

2 Használja a „Lumitester” alkalmazást.

3 Az alkalmazás automatikusan megjeleníti a vizsgálat eredményét. Az eredmények korábbi alakulása is könnyen megtekinthető.

4 A vizsgálatok eredménye el lesz mentve a felhő tárhelyen és más okoskészülékekről is megtekinthető.

## 1 A csomag tartalma




## 2 Beállítás

### Az elemek behelyezése és a Bluetooth KI/BE kapcsolása

Az elemtartó és a Bluetooth KI/BE kapcsoló az elemtartó fedele alatt található. A Bluetooth KI/BE kapcsoló gyári alapbeállítása a KI állás.

#### Az elemtartó kinyitása/bezárása

- 1 Nyomja meg a „PUSH” feliratot a támasztó kinyitására.
- 2 Nyomja meg az elemtartó fedelén a ietet a fedél levételéhez.

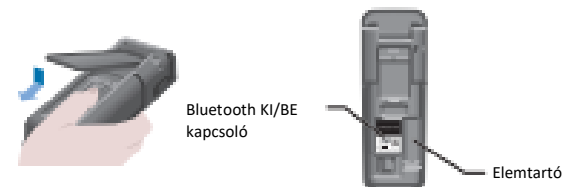

- 3 Ha mindennel végezt, helyezze vissza az elemtartó fedelét.

#### Az elemek behelyezése

Tegyen be két új AA méretű alkáli elemet vagy feltöltött AA méretű nikkal-hibrid elemet, figyeljen az elemek irányára.



#### Bluetooth KI/BE kapcsolása

Az okostelefonra és/vagy tabletre telepített alkalmazáshoz való csatlakozáshoz állítsa a Bluetooth KI/BE kapcsolót a BE állásba. A kijelzőn ekkor megjelenik a Bluetooth BE jel.



#### Figyelem


- A felhasználható rádió frekvencia sávok és a kommunikációs módok minden országban külön vannak meghatározva. Egyes országokban lehet, hogy kötelező a vezeték nélküli készülékek regisztrációja. Az alábbi weboldalon megtalálja azon országok listáját, ahol használni lehet a Bluetooth csatlakozást: <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart> Amennyiben az országa nincs a listán, akkor kapcsolja KI a Bluetooth csatlakozást.
- A készüléket a számítógéphez nem lehet Bluetooth-on keresztül csatlakoztatni. Ehhez használja a mellékelt USB kábelt.

Ez a rövidített kézikönyv bemutatja a mérés folyamatát, amikor a termék csatlakoztatva van egy okostelefonhoz és/vagy tablethez. A méréseket elvégezheti csak a termékkel és egy „LuciPac A3/Pen”-el. A számítógéphez való csatlakoztatás alatt végzett mérésekhez és a csak a termékkel elvégzett mérésekhez lásd a Kézikönyvet.

## Az applikáció használata (ingyenes)




- 1 Töltse le az applikációt az okostelefonjára vagy tablettjére a QR kód leolvasásával vagy a link felkeresésével. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>

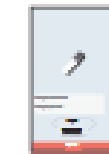


- 2 Indítsa el az applikációt és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az applikáció beállításához. Az alkalmazás első használatakor el kell végezni a kezdeti regisztrációt. A regisztrált felhasználók az azonosítói és jelszói megadásával léphetnek be.



- 3 Amikor az okos készüléken megjelenik a csatlakozás képernyő, kapcsolja be a terméket. Ha a Bluetooth nincs bekapcsolva, akkor kapcsolja BE a beállítások képernyőn.

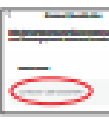

- 4 Az alkalmazásban válassza ki a termék sorozatszámát. Ez lehetővé teszi az idő és dátum automatikus szinkronizálását és a mért adatok időbélyegzését.

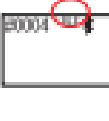

- 5 A csatlakozás létrejöttkor az állapotjelzőn megjelenik a BLE jelzés.
- 6 Ha megjelenik a főképernyő, akkor az okostelefon/tablet és a termék használatra kész.

Az alkalmazás súgóiban (Help) megtalálja az alkalmazás részletes leírását.

## 3 A vattás pálcás teszt elvégzése

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a készülék bekapcsológombját egy ideig.
- 2 Indítsa el az alkalmazást, válassza ki a vizsgálati pontot és indítsa el a mérést.
- 3 Végezze el a vattás pálcás vizsgálatot. (A „LuciPac A3/Pen” csőről részletesebben a Kézikönyvben olvashat.)
- 4 Nyissa ki a mérőkamra fedelét és helyezze a „LuciPac A3/Pen” csövet a kamrába.
- 5 Zárja be a mérőkamra fedelét és nyomja meg a START gombot. Ekkor elkezdődik a mérés. A visszazámlálás után megjelenik a mérés eredménye.
- 6 Vegye ki a „LuciPac A3/Pen” csövet a mérés elvégzése után. Amíg ki nem veszi a „LuciPac A3/Pen” csövet a mérőkamrából, addig egy figyelmeztető hangjelzés fog szólni. Kövesse a helyi rendszabályokat a „LuciPac A3/Pen” ártalmatlanítása során.

## 4 Az eredmények megtekintése az alkalmazásban

- 1 A készülék automatikusan elküldi a mérési eredményeket az okostelefonra vagy tabletre, és az alkalmazás megjeleníti azokat az adott vizsgálati pontnál.
- 2 Ha egy vizsgálati ponthoz referencia értéket állított be, akkor azonnal látni lehet, hogy a vizsgálat eredménye megfelelt-e.
- 3 Az eredmények alakulását mutató grafikon automatikusan megjelenik minden vizsgálati pontnál.
- 4 Az egyes vizsgálati pontok megfelelési aránya és grafikonja megtekinthető az alkalmazás elemzés funkciójával.

\*Az alkalmazás képernyőinek fejlesztése még

Az alkalmazás súgóiban (Help) megtalálja az alkalmazás részletes

## 5 A biztonságos és helyes kezelésre irányuló óvintézkedések

- Ezt a készüléket ATP vattás pálcás tesztek elvégzésére terveztük meg. Tilos a terméket bármilyen más célra felhasználni.

Olvassa át ezt alaposan a készülék megfelelő használatához.

A készülék használata előtt alaposan olvassa el ezt „A biztonságos és helyes kezelésre irányuló óvintézkedések” szakaszt. Az alábbiakban felsorolt óvintézkedések a fontos biztonsági problémákra és a hibákra és meghibásodásokra vonatkoznak.

- Figyelem** A termék helytelen használata sérülést vagy károkat okozhat.
- Tilos** Ez a jelzés arról tájékoztat, hogy mit NEM szabad tenni a készülék használatá során.

Figyelem	
Tilos a készülék szétszerelése vagy módosítása. Ez tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat.	Ne érintse meg a készüléket vizes kézzel. Ez áramütést vagy meghibásodást okozhat.
Ne nyomja be vagy dörzsölje meg a kijelzőt és a kezelőpanelt kemény vagy éles tárgyakkal. Ez sérülést vagy meghibásodást okozhat.	Csak a megadott jellemzőkkel rendelkező elemeket használja (AA méretű alkáli elemek vagy újratölthető AA méretű nikkal-hibrid elemek). Ennek nem tartása tüzet, égést vagy meghibásodást okozhat.
Tilos a terméket szerves oldószerekkel tisztítani. Ez tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat.	Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja. Ennek elmulasztása szivárgást vagy robbanást okozhat.
A terméket tilos olyan helyen használni vagy tárolni, ahol közvetlen napfénynek, pornak és/vagy magas hőmérsékletnek/páratartalomnak van kitéve. Ennek nem tartása tüzet vagy meghibásodást okozhat.	A terméket ne tegye olyan helyre, ahol nagyon magas lehet a hőmérséklet (tűz mellé, fűtőtest közelébe vagy közvetlen napfényre). Ez tüzet, égést vagy meghibásodást okozhat.

## 6 Eladás utáni szolgáltatások

### Jótállás

A Lumitester Smart készülékre vállalt jótállás egy év a vásárlás napjától számítva. Azonban azon EU tagállamokban, ahol érvényben van az 1999/44/EK EU irányelv, ott a jótállás két év a vásárlás napjától számítva. Amennyiben a készülék meghibásodik a jótállás időtartama alatt, akkor ingyenesen elvégezzük a javítást vagy cserealkatrészeket biztosítunk. Azonban a jótállás csakis az anyag- vagy gyártási hibákból keletkező meghibásodásokra vonatkozik. Az alábbiak azonban nem tartoznak a jótállás hatálya alá még az érvényességi időszak alatt sem.

- 1 Ha nem áll rendelkezésre semmilyen okirat vagy feljegyzés, ami igazolná a vásárlás időpontját.
- 2 A hiba fennállásától függetlenül a jótállás nem fedezi a mérések eredményének elvesztését, ha azt a memóriában tárolt adatok vagy a beállítások megjelenítésének vagy számítógépre való áttöltésének akadályoztatása okozta.
- 3 Minden olyan meghibásodás vagy sérülés, és minden más veszteség, amely azért keletkezett, mert a terméket nem a kézikönyvben leírtak szerint használta, gondatlanul kezelte, megváltoztatta vagy másként átalakította, vagy amelyet emberi befolyáson kívülre eső természeti katasztrófa okozott.

A termék meghibásodása miatti kártérítés korlátozva van a jelen jótállásról szóló szakaszban megadott kártérítésre, és minden más veszteség vagy kár kártérítése, beleértve a közvetett vagy speciális veszteségeket és károkat, nem tartozik a kártérítés hatálya alá.

A teljesítmény javítása érdekében fenntartjuk a jogot a jellemzők előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Kiadta:

Kikkoman Biochemifa vállalat  
2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japán  
TEL: +81-3-5521-5481 FAX: +81-3-5521-5498  
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>