


EasyPlate™

Ahorre tiempo, trabajo y costos con Kikkoman EasyPlate.

Easy Plate es una placa de medio preparada y conveniente para realizar pruebas microbiológicas más rápidas y sencillas.

Fácil de usar,
no requiere
esparcidor de placas.

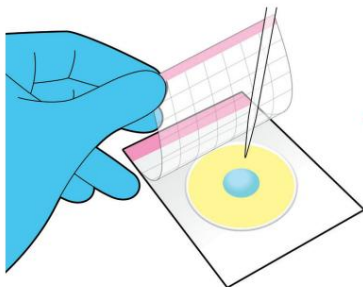

Producto	EasyPlate AC Bacterias aeróbicas
Incubación	35+/-1°C, 48 +/-2 horas
Duración	18 meses después de fabricación
Certificaciones	AOAC PTM, MicroVal, NordVal



Producto	EasyPlate CC Bacterias coliformes
Incubación	35+/-1°C, 24+/-1 horas
Duración	18 meses después de fabricación
Certificaciones	AOAC PTM, MicroVal, NordVal



Producto	EasyPlate EC E. coli y coliformes
Incubación	35+/-1°C, 24+/-1 horas
Duración	18 meses después de fabricación
Certificaciones	AOAC PTM, MicroVal, NordVal



Producto	EasyPlate SA Estafilococo áureo
Incubación	35 o 37 +/-1°C, 24+/-1 horas
Duración	12 meses después de fabricación
Certificaciones	AOAC PTM, MicroVal, NordVal



Producto	EasyPlate YM-R Levadura y moho rápido
Incubación	25+/-1°C, 48+/-2 horas
Duración	18 meses después de fabricación



Producto	EasyPlate EB Enterobacteriaceae
Incubación	35+/-1 o 37+/-1°C 24+/-1 horas
Duración	12 meses después de fabricación



Descarga gratuita

Sistema de recuento de colonias para Easy Plate



Aumente la productividad del laboratorio
fácilmente con el contador de colonias automático



- Arriba de 7 placas pueden ser insertadas de una sola vez.
- Altamente eficaz con tecnología de IA
- Automáticamente determine cual de los 5 productos de EasyPlate es y cuenta colonias.
- También identifica colonias esparcidas
- Los parámetros para juzgar colonias están disponibles sin ninguna configuración adicional
- Capaz de modificar el resultado y agregar comentarios

Idiomas aceptados:

Inglés, Alemán, Español, Frances, Coreano, Tailandés, Vietnamita, Chino simplificado, Chino tradicional y Japones



Requiere el escáner (ADS-4300N9 de BROTHER INDUSTRIES, LTD.) para visualización de EasyPlate. Nosotros no vendemos el escáner.

kikkoman

Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1 Nishi-shinbashi, Minato-ku,

Tokio 105-0003 JAPÓN

biochemifa@mail.kikkoman.co.jp

<https://biochemifa.kikkoman.com/e/>

© 2023 Kikkoman Corp. (6012W240101)

¡Síguenos en las
redes sociales!

